

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 180kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Placez les pieds de la personne sur le repose-pied.
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras de la personne sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manœuvres.

Panneau de commande

Réglage vers le haut




Réglage vers le bas



Mise en marche



2 secondes

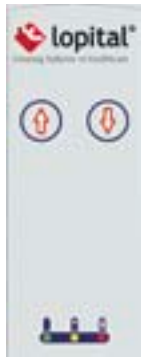

Important !

Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.




Utilisation

1. Allumez l'Elexo en enfonçant pendant 2 secondes le bouton de réglage vers le haut.
Remarque : Après utilisation, la chaise Elexo se met en veille après 60 minutes.
 2. Ajustez la position de la chaise et relevez le repose-pied.
 3. Verrouillez les freins de la chaise.
 4. Ouvrez les accoudoirs et, au besoin, rabattez-les vers le haut.
 5. Assistez la personne à mobilité réduite lorsque celle-ci s'assoie.
 6. Refermez les accoudoirs et placez les pieds de la personne à mobilité réduite sur les palettes du repose-pied.
- Lorsque la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

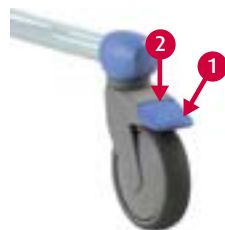

Repose-pied



Les deux repose-pieds doivent être dégagés lorsque la personne à mobilité réduite s'assoie. Rabattez pour cela vers le haut le repose-pied (1) ou écartez-les en les faisant pivoter (2). Assurez-vous que la personne à mobilité réduite garde les deux pieds sur le repose-pied lorsque la chaise est en déplacement.

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage.
2. Rotation.
3. Rabattre vers le haut.



Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Elexo au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles.



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Éteint | État de veille. |
| Vert | Chaise opérationnelle. |
| Orange clignotant | L'arrêt d'urgence est activé. |
| Orange | Batterie à mi-charge. |
| Rouge clignotant | Batterie quasi déchargée. |
| Rouge | Batterie déchargée. |

Pendant le chargement des batteries, l'Elexo n'est pas utilisable.

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'assoie.
- *Compatibilité avec WC* : La chaise Elexo peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique* : la chaise Elexo peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions du Elexo, utilisez le bouton d'abaissement d'urgence pour redescendre le siège.



Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Elexo doit être nettoyée à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.
Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi (www.lopital.fr).

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi

Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur : www.lopital.fr